

INSTRUKCJA POBRANIA MATERIAŁU DO CYTOLOGII PŁYNNEJ LBC

Materiał: wymaz z kanału szyjki macicy

Warunki pobrania materiału: wymaz z kanału szyjki macicy powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany w tym kierunku personel medyczny w lateksowych rękawiczkach.

Zestaw do badania :

- Szczoteczka cytologiczna Rovers Cervex-Brush
- Pojemnik z podłożem płynnym Surepath
- Instrukcja pobrania i przygotowania do badania
- Skierowanie na badanie do uzupełnienia przez pacjenta




Przygotowanie pacjenta do badania:

- Cytologię ginekologiczną wykonujemy między 10. a 20. dniem cyklu miesięczkowego; nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem miesiączki oraz nie wcześniej niż 2 dni po jej zakończeniu (Nie należy wykonywać wymazu w trakcie trwania krwawienia miesięczkowego!).
- Nie stosować żadnych leków dopochwowych przez 7 dni przed pobraniem materiału do badania.
- Nie należy współżyć przez 24h przed pobraniem materiału do badania.
- Materiał do badania należy pobrać minimum 24h po USG dopochwowym lub badaniu ginekologicznym.

Wykonanie wymazu z kanału szyjki macicy:

1. Wyciągnąć szczoteczki cytologiczną z opakowania ochronnego.
2. Wprowadzić do kanału szyjki macicy centralne włoski szczoteczki oraz lekko nacisnąć w taki sposób, aby boczne włoski szczoteczki zagięły się ku bokom przy kontakcie z tarczą szyjki macicy. **(W przypadku gdy Pacjentka jest w ciąży, szczoteczki nie należy wprowadzać głęboko do kanału szyjki macicy!)**
3. Utrzymując nacisk, szczoteczki należy pięciokrotnie obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
4. Szczoteczki należy wyciągnąć, nie dotykając przy tym ścian pochwy.
5. Ostrożnie odkręcić pojemnik, w którym znajduje się podłoże transportowe oraz umieścić w nim szczoteczki z pobranym materiałem do badania.
6. Szczoteczki w pojemniku należy kilkakrotnie wymieszać, następnie załamać ją w miejscu do tego wyznaczonym, tak aby część szczoteczki z pobranym materiałem zmieściła się do środka pojemniczka. (Uwaga! Nie opróżniamy pojemniczka z płynu, ponieważ jest to podłoże transportowe niezbędne do transportu materiału oraz uzyskania prawidłowego wyniku badania!).
7. Pojemnik z podłożem transportowym oraz umieszczoną w środku szczoteczki z pobranym wymazem z kanału szyjki macicy należy **szczelnie zakręcić**.

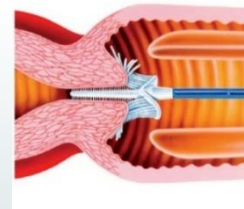

Przygotowanie próbki do wysyłki:

- Pobrany materiał przechowujemy oraz transportujemy w temperaturze 2° - 25° Celsjusza.
- Próbkę powinna trafić do laboratorium w ciągu 72h od momentu pobrania materiału.
- Czytelnie wypełniamy dołączone do zestawu skierowanie na badanie.
- Zabezpieczony materiał wraz z uzupełnionym skierowaniem należy wysłać na adres laboratorium:

Laboratorium Al-Med
ul. Przedborska 2
97-500 Radomsko

Ze względu na wydłużony czas transportu w weekendy, zalecamy pobierać i wysłać materiał w dniach poniedziałek-czwartek. W przypadku pobrania materiału w piątek, próbkę należy przechować w odpowiednich warunkach i wysłać w poniedziałek.